



Une administration constante

Système compresseur nébuliseur Philips Respironics InnoSpire Elegance

Une conception à toute épreuve

Destiné à une utilisation fréquente, l'InnoSpire Elegance allie puissance et style. Membre de la famille de compresseurs nébuliseurs InnoSpire, l'Elegance administre les médicaments aux patients de manière fiable, rapide et efficace, à l'hôpital comme à domicile.

Une technologie de nébulisation éprouvée

L'Elegance est combiné avec le nébuliseur réutilisable SideStream dont la capacité à générer jour après jour un aérosol de grande qualité n'est plus à démontrer.


Caractéristiques principales

- Couplé à la technologie éprouvée SideStream
- Temps de traitement courts : 6 à 8 minutes*
- Convient à une utilisation en continu et idéal à l'hôpital comme à domicile


PHILIPS
RESPIRONICS

Une administration d'aérosol fiable et sûre

L'Elegance est combiné avec le nébuliseur à hautes performances SideStream. SideStream a été conçu pour aspirer davantage d'air, grâce à un venturi actif, ce qui permet une administration des médicaments plus rapide et des temps de traitement moins longs. Son système de buse unique en forme de diamant aide à réduire l'usure liée à une utilisation fréquente et contribue à maintenir un aérosol de grande qualité.

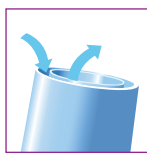

Grâce à son venturi, SideStream génère un débit de 16 l/min

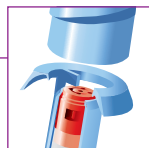

Buse innovante produisant jour après jour un aérosol de qualité



Performances

DAMM	2,9 µm
Proportion de particules fines	77 % en-dessous de 5 µm
Temps de traitement (charge de 2,5 ml)	6 à 8 minutes

Description du produit (par voltage/fréquence)

Description du produit (par voltage/fréquence)	Références
Elegance 230 V / 50 Hz prise UE	1099973
Elegance 230 V / 50 Hz prise RU	1099971
Elegance 230 V / 50 Hz prise australienne	1099970
Elegance 220 V / 60 Hz prise RU	1100309
Elegance 220 V / 60 Hz prise coréenne	1102460
Ensemble réutilisable SideStream pour un an	2010A
Kit réutilisable SideStream avec masque adulte	1223A
Kit réutilisable SideStream avec masque enfant	1224A
Kit réutilisable SideStream avec embout buccal	1225A
Filtres à air (lot de 4)	1102088

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 V / 50 Hz, 1 A	220 V / 60 Hz, 1,2 A
Pression max. du compresseur	317 kPa	296 kPa
Débit moyen	6 l/m à 10 psig	7 l/m à 10 psig
Débit maximum	8,0 l/m	9,3 l/m
Protection contre les surcharges thermiques	Disjoncteur thermique ; température de coupure 150 °C	
Poids	1,5 kg	
Dimensions (l x L x H)	165 x 165 x 108 mm	
Niveau sonore	58 ±3 dBA	

* Données disponibles chez Philips Respironics



Respironics, InnoSpire, Elegance et SideStream sont des marques commerciales de Koninklijke Philips N.V. et de ses filiales. Tous droits réservés.

Ce document est à destination des professionnels de santé. InnoSpire Elegance est un compresseur pour nébuliseur, destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. SideStream est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance du médicament. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Ces dispositifs font l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie, dans certaines situations : consulter la LPPR. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation accompagnant les dispositifs médicaux, pour toute information relative à leur usage préconisé et à leur utilisation. Création du document le 28 novembre 2013.

Scannez avec votre smartphone ou avec votre tablette pour visiter notre site Internet.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.philips.com/innospire



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques de ses produits et/ou d'en arrêter la production à tout moment, sans préavis ni obligation, et ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

BROUDY AE XX/XX/XX MCI 4105491 PN 1106944

Philips Healthcare fait partie de Royal Philips

Philips Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17 – 82211
Herrsching Germany
+49 8152 93 06 0
Philips Respironics Benelux
+33 1 47 28 30 83
Philips Respironics France
+33 2 51 89 36 00
Philips Respironics Suisse
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester PO20 2FT
Royaume-Uni

Service Clients
+1 724 387 4000
www.apneesommeil.respironics.fr